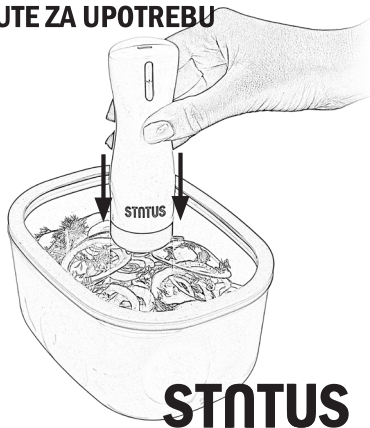


BATERIJSKA VAKUUMSKA PUMPICA BVP 50

UPUTE ZA UPOTREBU

**STATUS**

izvorna pomagala

1. SIGURNOSNE UPUTE I OBJAŠNJENJE DJELOVANJA APARATA

1.1. RADNI UVJETI

Maksimalna temperatura okoliša pri normalnoj upotrebi je $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$, prosjek temperature u 24 sata ne smije premašiti $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$. Najniža dozvoljena temperatura okoliša tijekom upotrebe je $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$, a tijekom punjenja $0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Najbolja je sobna temperatura. Okolni zrak mora biti čist, relativna vlažnost ne smije biti nad 50 % pri maksimalnoj temperaturi

+40 °C. Više relativne vlage su dozvoljene pri nižoj temperaturi okoliša (npr. 90 % pri +20 °C).

1.2. SIGURNOSNE UPUTE

- a.) Radna površina mora biti suha i normalno temperirana (ne smije biti vruća), ne smije biti u blizini toplinskog odašiljača (npr. ploče za grijanje) ili izvora vode.
- b.) Provjerite USB kabel, konektore, adapter (koji možete dokupiti) i utičnicu, prije nego što uređaj priključite na električnu mrežu. Primijetite li bilo kakvu pogrešku, obratite se našoj servisnoj

službi navedenoj niže u uputama.

- c.) Uređaj koristite isključivo za namjene opisane u uputama.
- d.) Ukoliko je USB kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, serviser ili slično osposobljena osoba kako bi izbjegli opasnost.
- e.) Uređaj mogu koristiti djeca od 8. godine starosti pa na više i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom odgovorne osobe za njihovu

sigurnost ili ako im ona daje potrebne upute za rad s uređajem na siguran način te ako razumiju moguće opasnosti.

f.) Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju čistiti ni održavati uređaj bez nadzora.

g.) Garancija gubi važnost ukoliko:

- uređaj proba popraviti neovlaštena i nestručna osoba,
- koristite uređaj za druge namjene od predviđenih,
- ne poštujete sigurnosne

propise i upute za upotrebu.

h.) Uređaj nikad ne koristite u eksplozivnoj atmosferi.

i.) Uređaj pohranjujte u suhim prostorima na sobnoj temperaturi, daleko od vatre ili visokih temperatura.

Pri pravilnoj upotrebi i ravnanju u skladu s uputama uređaj nije opasan.

Električni dijelovi iz kojih je načinjen su pod niskim naponom i zaštićeni su od prašine.

Prije upotrebe obavezno u cijelosti pročitajte uputstva za upotrebu.

Uputstva je potrebno pohraniti

pored uređaja i uvijek moraju biti na raspolaganju.

Otvaranje i posezanje u unutrašnjost uređaja nije dozvoljeno. Proizvođač ne preuzima odgovornost za ozljede koje proizlaze iz nepravilne upotrebe ili su posljedica nepoštivanja uputstava.

1.3. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- a.) Prije čišćenja adapter uređaja isključite iz električne mreže.
- b.) USB kabel i uređaj pohranjujte u suhim i prozračnim prostorima.

- c.) Za čišćenje uređaja koristite mekanu suhu ili navlaženu krpu. Ne koristite spužve, hrapave krpe, sredstva za poliranje ili dezinfekciju koja mogu oštetiti površinu pojedinih sastavnih dijelova. Uređaj nemojte uranjati u vodu ili prati pod mlazom vode. Sredstva za čišćenje nikada ne špricajte direktno po unutrašnjoj ili vanjskoj strani aparata.
- d.) Prije upotrebe, uređaj mora biti potpuno suh.
- e.) Ako tekućina dospije u unutrašnjost aparata, posavjetujte se s prodavačem ili ovlaštenim serviserom.

1.4. SERVISIRANJE

- a.) Uređaj može popravljati samo za to osposobljena i ovlaštena osoba.
- b.) Popravke mogu vršiti samo stručne osobe koje sukladno svojim tehničkim obrazovanjem i iskustvom, te uz poznavanje odgovarajućih standarda znaju ocijeniti radove i s njima povezane opasnosti.
- c.) Otklanjanje nepravilnosti vrši proizvođač ili ovlašteni zastupnik.
- d.) Ukoliko je moguće, elementi koje je potrebno zamijeniti, zamjenjuju se s originalnim tj. funkcionalno jednakim

rezervnim dijelovima.

1.5. OPĆE INFORMACIJE

Baterijska vakuumska pumpica BVP 50 je uređaj, namijenjen vakuumiranju Statusovih vakuumskih posuda, vrčeva, poklopaca i čepova, čime u posudi, vrču, boci ili staklenci kreiramo vakuum potreban za kvalitetno pohranjivanje namirnica.

Najveće prednosti pohranjivanja u vakuumu su:

- očuvanje vitamina, minerala i hranjivih tvari te aroma namirnica,
- zaštita namirnica pred širenjem plijesni i bakterija,
- produžavanje postojanosti namirnica,
- namirnice u vakuumskim posudama možemo pohranjivati u hladnjaku ili zamrzivaču,
- onemogućava miješanje neugodnih mirisa namirnica u hladnjaku i zamrzivaču.

Upotreba vakuumske pumpice je jednostavna i učinkovita. Pohranjivati ćete potpuno prirodno, zdravije, hrana će biti duže svježja i uštedjeti ćete vrijeme i novac.

Prije prve upotrebe pročitajte upute te se ih pridržavajte. Ukoliko se pojavi kakvo pitanje, mišljenje ili komentar, nazovite nas ili nam pišite.

Na internetnoj adresi www.status-trgovina.hr su

ove upute dostupne u elektronskom obliku.

1.6. TEHNIČKI PODACI

Dimenzije	45 x 43 x 141 mm
Težina	0.145 kg
Materijali	PC ABS plastika, silikon
Nazivni napon i struja	3,7 V --- , Li-Ion, 1.85 Wh, 500 mAh
Adapter (nije priložen)	Ulaz: 100-240 V $\sim$, 50-60 Hz Izlaz: 5 V --- , 1200 mA

1.7. SASTAVNI DIJELOVI I OPIS DJELOVANJA

Na slici 1 je prikazana vakuumska pumpica BVP 50. Vakuumska pumpica je jednostavna za korištenje. Samo ju namjestite na silikonski ventil i pritisnite tipku.

Objašnjenje indikacijskih svjetla:

- Indikacijsko svjetlo tijekom djelovanja


pulsira naizmjenično crveno i zeleno.

- Treperenje crvenog svjetla znači da je baterija prazna te je pumpicu treba napuniti.
- Pumpica je napunjena kad se crveno svjetlo promijeni u zeleno.

Baterijska vakuumska pumpica vakuumira posude, vrčeve, staklenke ili boce na unaprijed zadani podtlak.

Najvažnije funkcije i sastavni dijelovi su označeni na slici 1.

1. Tipka i indikator u boji
2. Tijelo vakuumske pumpice
3. Prilagodljiva silikonska brtva
4. USB kabel za punjenje
 - a.) USB-A i
 - b.) USB-C
5. Utor za USB-C konektor

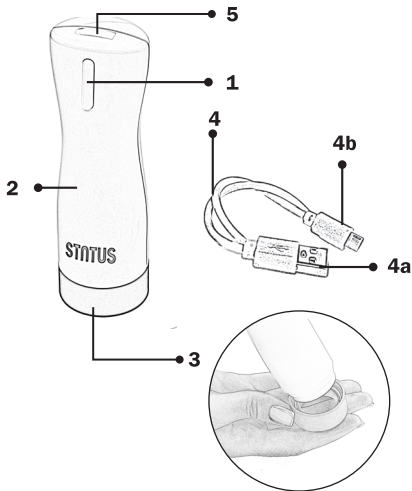

Slika 1: Status BVP 50 – sastavni dijelovi.

2. UPOTREBA


2.1. OPĆE UPUTE

- Pri vađenju pumpice iz ambalaže provjerite ima li sve sastavne dijelove i je li stanje uređaja i pripadajućih dijelova besprijekorno. Posebice budite pozorni da dijelovi ambalaže ne ostanu unutar brtve.
- Prije prve upotrebe precizno proučite upute za upotrebu te se ih pridržavajte.
- Električna vakuumska pumpica je pomagalo prilagođeno upotrebi u domaćinstvu.


2.2. UPUTE ZA UPOTREBU

- Prije prve upotrebe napunite vakuumsku pumpicu.
- Ako je utor na poklopcu posude predubok, prilagodite brtvu pumpice. Brtva ima 2 položaja:
 - Originalan položaj (Slika 2) za Fresko i Viva Status vakuumske posude, univerzalne vakuumske poklopce, vakuumski vrč (okrugli) i vakuumske čepove.

- Okrenut položaj (Slika 3) za originalne, full tritan i staklene vakuumske posude.

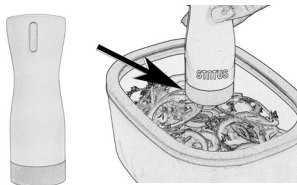

Slika 2: Originalan položaj brtve.

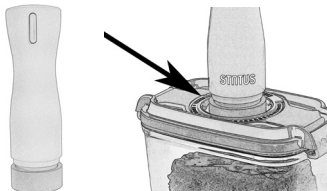

Slika 3: Okrenuta brtva.

- c.) Vakuumirajte tako da vakuumsku pumpicu namjestite na ventil na sredini poklopca vakuumske posude, vrča ili univerzalnog poklopca i nježno pritisnite.

- d.) Pritisnite tipku. Pumpica automatski izvuče zrak iz posude, vrča ili staklenke.
- e.) Tijekom vakuumiranja indikacijsko svjetlo pulsira izmjenično crveno i zeleno.
- f.) Vrijeme vakuumiranja ovisi o veličini posude i količini namirnica: manja posuda se vakuumira brže od velike i puna brže od prazne.
- g.) Pumpica se sama isključi kad je u posudi postignut zadani podtlak.
- h.) Pumpicu tokom rada možemo isključiti pritiskom na tipku.
- i.) Ukoliko se baterija pumpice isprazni, pritiskom pritiska na tipku uređaj se ne aktivira. Potrebno je punjenje.

2.3. PUNJENJE

- a.) Prije prve upotrebe, vakuumsku pumpicu je treba napuniti. Manji USB nastavak (USB-C) umetnite u otvor na vrhu pumpice, veći nastavak priključka USB (USB-A) priključite u električni adapter s USB otvorom.
- b.) Pumpicu možete puniti adapterom (5 V, 1200 mA), prijenosnom baterijom

(5 V $\overline{\text{---}}$, min. 2000 mAh) te priključivanjem na osobno ili prijenosno računalo u USB utor. U tom slučaju brzina punjenja ovisi o namjeni USB utora: ukoliko je namijenjen prijenosu podataka, punjenje će biti sporije, ukoliko je namijenjen punjenju električnih naprava, biti će brže. Obično traje od 45 min do 2 sata da se pumpica potpuno napuni.

- c.) Tijekom punjenja uređaja indikacijsko svjetlo svijetli crveno.
- d.) Punjenje je gotovo kad indikacijsko svjetlo promijeni boju u zeleno.
- e.) Napunjena pumpica možete napraviti do 100 ciklusa vakuumiranja.
- f.) Dugotrajno nekorisćenje i nepunjenje baterije dovodi do samopražnjenja. Kako bi omogućili optimalno djelovanje baterije, napunite ju bar jedanput u 3 mjeseca.

3. IZJAVA O SUKLADNOSTI

- a.) Direktiva o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu električne opreme namijenjene za

uporabu unutar određenih naponskih granica:
LVD DIREKTIVA 2014/35/EU EUROPSKOG
PARLAMENTA I VIJEĆA

- b.) Direktiva o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na elektromagnetsku kompatibilnost:
EMC DIREKTIVA 2014/30/EU EUROPSKOG
PARLAMENTA I VIJEĆA



EU izjava sukladnosti garancija je da je naprava sigurna, pregledana i testirana i da odgovara svim zahtjevima koji su navedeni u važećim standardima, direktivama i propisima.

EU Izjava o sukladnosti za označavanje CE se nalazi kod prodavatelja i može se dostaviti na zahtjev kupca.

4. SAVJETI PRI SMETNJA- MA DJELOVANJA

Smetnje pri djelovanju:	Pomoć:
Pumpica ne reagira na pritisak gumba.	• Najvjerojatnije se pumpica ispraznila. Napunite bateriju.

Smetnje pri djelovanju:	Pomoć:
Pumpica ne vakuumira posude, univerzalne poklopce ili vrč ili oni ne zadržavaju vakuum.	• Provjerite jesu li poklopac vakuumske posude, silikonska brtva i ventil posude pravilno namješteni. • Provjerite jesu li silikonska brtva i ventil posude čisti i suhi. Po potrebi ih odstranite s poklopca, očistite i ponovno namjestite.
Pumpica ne paše u utor poklopca posude.	• Okrenite brtvu pumpice. Gledajte točku 2.2. b.).

Smetnje pri djelovanju:	Pomoć:
Pumpica radi ali ne vakuumira posude.	• Tijekom vakuumiranja pritisnite pumpicu u utor poklopca da zabrtvite prostor oko ventila. • Provjerite jesu li poklopac posude, silikonska brtva i ventil pravilno namješteni. • Provjerite jesu li silikonska brtva i ventil posude čisti i suhi. Po potrebi ih odstranite s poklopca, očistite i ponovno namjestite.
Nastale nepravilnosti se ne mogu otkloniti.	• Obavezno kontaktirajte servis. Proizvođač će preuzeti odgovornost samo, ako se pridržavate uputa i uređaj ne popravljate sami.

5. INFORMACIJE O PRAVILNOM ODSTRANJIVANJU UREĐAJA

Po isteku životnog vijeka, opremu ili dijelove opreme je potrebno odstraniti iz upotrebe. Odsluženi dijelovi se odlažu na deponij za industrijske otpadke u skladu s važećim propisima:

- Direktiva o otpadnoj električnoj i električnoj opremi (OEEO):
DIREKTIVA 2012/19/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
- Direktiva o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i električnoj opremi:
DIREKTIVA 2011/65/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

Okolišu štetne komponente i dijelove iz aparata je potrebno odstraniti na tome posebno namijenjena mjesta.



Oznaka na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označava da po isteku njegovog životnog vijeka s njim nije dozvoljeno ravnati kao s drugim kućanskim otpacima. Vaša dužnost je izrabljenu napravu

predati na posebna skupna mjesta za izdvojeno prikupljanje otpada u okviru vaše lokalne zajednice, odnosno zastupniku koji se bavi prikupljanjem otpadne EE opreme.

Izdvojeno odstranjivanje pojedinih dijelova EE opreme sprečava negativne posljedice zagađenja okoline i nastanka opasnosti po zdravlje do kojeg može doći zbog neodgovarajućeg odstranjivanja proizvoda. Pored toga takvo odstranjivanje omogućava ponovnu preradu materijala iz kojeg je proizvod izrađen i na taj način energetske i sirovinu uštedu.

Za detaljnije informacije o sakupljanju, razvrstavanju, ponovnoj upotrebi i recikliranju tog proizvoda obratite se izvođaču koji se bavi preuzimanjem otpadne EE opreme ili trgovini u kojoj ste opremu kupili.

Datum izrade aparata je otisnut na garancijskom listu kojeg ste dobili prilikom kupovine.

6. GARANCIJA

Valjanost garancije Statusovog električne vakuumske pumpice je **dvije godine**.

Obaveza vrijedi od dana kupovine i ne obuhvaća pravo na korištenje garancije u slučaju kvara uslijed nepoštivanja uputstava za upotrebu, održa-

vanja i čišćenja, odnosno radi nepravilne upotrebe ili upotrebe za druge namjene od predviđenih.

Za korištenje garancije morate obavezno priložiti račun, zato ga, molimo vas, pohranite.

Pojave li se pitanja u vezi djelovanja aparata, servisa, korištenja garancije ili komentari, kontaktirajte nas na:

STATUS izvorna kućna pomagala d.o.o. Karlovac
Smičiklasova 5c, 47000 Karlovac

Servisni telefon: +385 (0)47 421 246

e-mail: info@status-trgovina.hr

Više informacija pronaći ćete na internet stranici
www.status-trgovina.hr.

7. BVP 50 SET

Set uključuje:

- 1 baterijsku vakuumsku pumpicu BVP 50
- 1 kabel za punjenje USB-A/USB-C
- 1 upute za upotrebu